

# TINY SIT

BLOOD TRANSFUSION CHAIR  
Designed By ARCHIMED

## BLOOD TRANSFU



DONATE

A O- B-  
A- AB-  
DONATE

# TINY SIT BLOOD TRANSFUSION CHAIR

Designed By ARCHIMED

BLOOD  
TRANSFUSION  
CHAIR



A SINGLE  
PINT CAN  
**SAVE**  
THREE LIVES  
A SINGLE  
GESTURE  
CAN CREATE  
A MILLION  
SMILES



## BT32 - S Archimed TinySit Kan Alma Koltuğu (2 Motorlu)

TinySit kan alma koltuğu sırt, oturak ve ayak parçası olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır. Koltuk kan alma ve diyaliz işlemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Kolay temizlenebilen anti-bakteriyel yapıda suni deri ile kaplanmıştır. Ayak ve oturak kısmı tek parça döşemeden oluşmaktadır. Koltuk dışındaki abs kaplamalar döşemenin içinde kalacak şekilde dizayn edilmiş olup ve döşeme ve plastik arasına kır ve girmesine engel olmaktadır. Her iki tarafta bulunan kolçaklar enil ve aşağı yukarı manuel olarak ayarlanabilip, sabitlenebilir. Sırt, oturak ve ayak kısımları düz konuma getirildiğinde, koltuk trendelenburg pozisyonunu almaktadır. Her bir teker ayrı ayrı kilitlenebilir ve koltuk istenilen noktada rahatça sabitlenebilir. Ayrıca tekerleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir. Koltuk üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantilidir.

**TINY SIT**  
BLOOD TRANSFUSION CHAIR  
DESIGNED BY ARCHIMED



Ayarlanabilir ense yastığı  
Adjustable neck cushion



Sağa sola hareket edebilen ve sökülüp takılabilen kolçaklar  
Removable and moving left to right armrests

## BT32 - S Archimed TinySit Blood Transfusion Chair (2 Motors)

Archimed TinySit Blood Transfusion Chair is designed for blood transfusion and hemodialysis surgeries. Chair consists of 3 main parts. Back rest, seat part and leg rest. The chair makes back up&down and leg rest up&down movements by 2 DC motors with using handset. During the bed position, the chairs takes the trendelenburg position. Chair is covered with cleanable, waterproof material and the chair is comfortable and orthopedically designed. Cushion has a suitable hardness and upholstery made of leatherette which is easy cleanable and harmless to skin. Seat and leg part cushions are not separate, they are made of one-piece cushion. Neck Cushion is given with the chair. Armrests can be fixed and adjusted manually. When back rest moves, armrests move together with the back rest and during this movement armrests stay parallel to the ground. The arm rests are easily removable. 4 lockable castors fix the chair to the floor.



Sırt hareketi / Back rest movement



Ayak hareketi / Leg rest movement



Trendelenburg hareketi / Trendelenburg movement

## Renkler



No:1 Beyaz / White



No:2 Krem / Beige



No:3 Sütü Kahve / Milky Brown



No:4 Koyu Kahve / Dark Brown



No:5 Fıstık Yeşili / Pistachio Green



No:6 Açık Yeşil / Light Green



No:7 Sarı / Yellow



No:8 Turuncu / Orange



No:9 Bordo / Claret Red



No:10 Pembe / Pink



No:11 Lila / Lilac



No:12 Açık Mavi / Light Blue



No:13 Lacivert / Navy Blue



No:14 Gri / Gray





No:15 Koyu Yeşil / Dark Green



No:16 Siyah / Black

## Teknik Özellikler / Technical Specifications

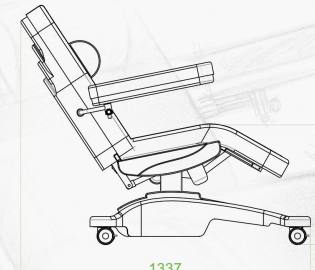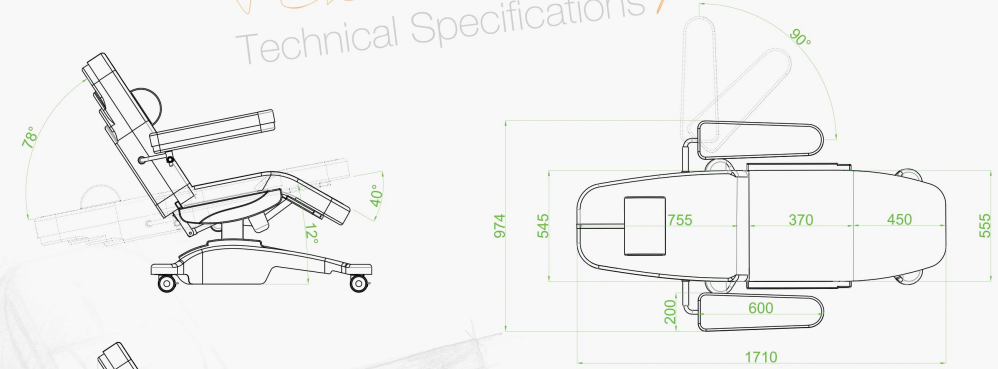


ÖZELLİKLER / FEATURES	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	
KOMPLE UZUNLUK / FULL LENGTH	1710 mm	67.32 Inch
EN / WIDTH	514 mm	20.23 Inch
KOLÇAKLI EN / WIDTH WITH ARMRESTS	974 mm	38.34 Inch
YÜKSEKLİK / HEIGHT	540 mm	21.25 Inch
SIRT EN / BACKREST WIDTH	545 mm	21.45 Inch
SIRT UZUNLUK / BACKREST LENGTH	755 mm	29.72 Inch
OTURAK EN / SEAT WIDTH	555 mm	21.85 Inch
OTURAK UZUNLUK / SEAT LENGTH	370 mm	14.56 Inch
AYAK EN / FOOTREST WIDTH	555 mm	21.85 Inch
AYAK UZUNLUK / FOOTREST LENGTH	450 mm	17.71 Inch
KOLÇAK UZUNLUK / ARMREST LENGTH	600 mm	23.62 Inch
KOLÇAK EN / ARMREST WIDTH	200 mm	7.87 Inch
TEKER ÇAP / WHEEL DIAMETER	75 mm	2.95 Inch
SIRT AÇISI / BACK ANGLE	78°	
AYAK AÇISI / FOOT ANGLE	40°	
TRENDELENBURG (SABİT) / TRENDLENBURG (STABLE)	12°	
SÜNGER DENSİTE / FOAM DENSITY	30	
DOŞEME ÖZELLİK / UPHOLSTERY FEATURE	SUNİ DERİ / LEATHERETTE	
TAŞIMA KAPASİTESİ / MAX. SAFE LOAD CAPACITY	220 kg	485.01 Pound
ÜRÜN AĞIRLIK / PRODUCT WEIGHT	80 kg	176.36 Pound

**TINY SIT**  
BLOOD TRANSFUSION CHAIR  
Designed By ARCHIMED

**BLOOD  
TRANSFUSION  
CHAIR**

BLOOD TRANSFUSION CHAIR

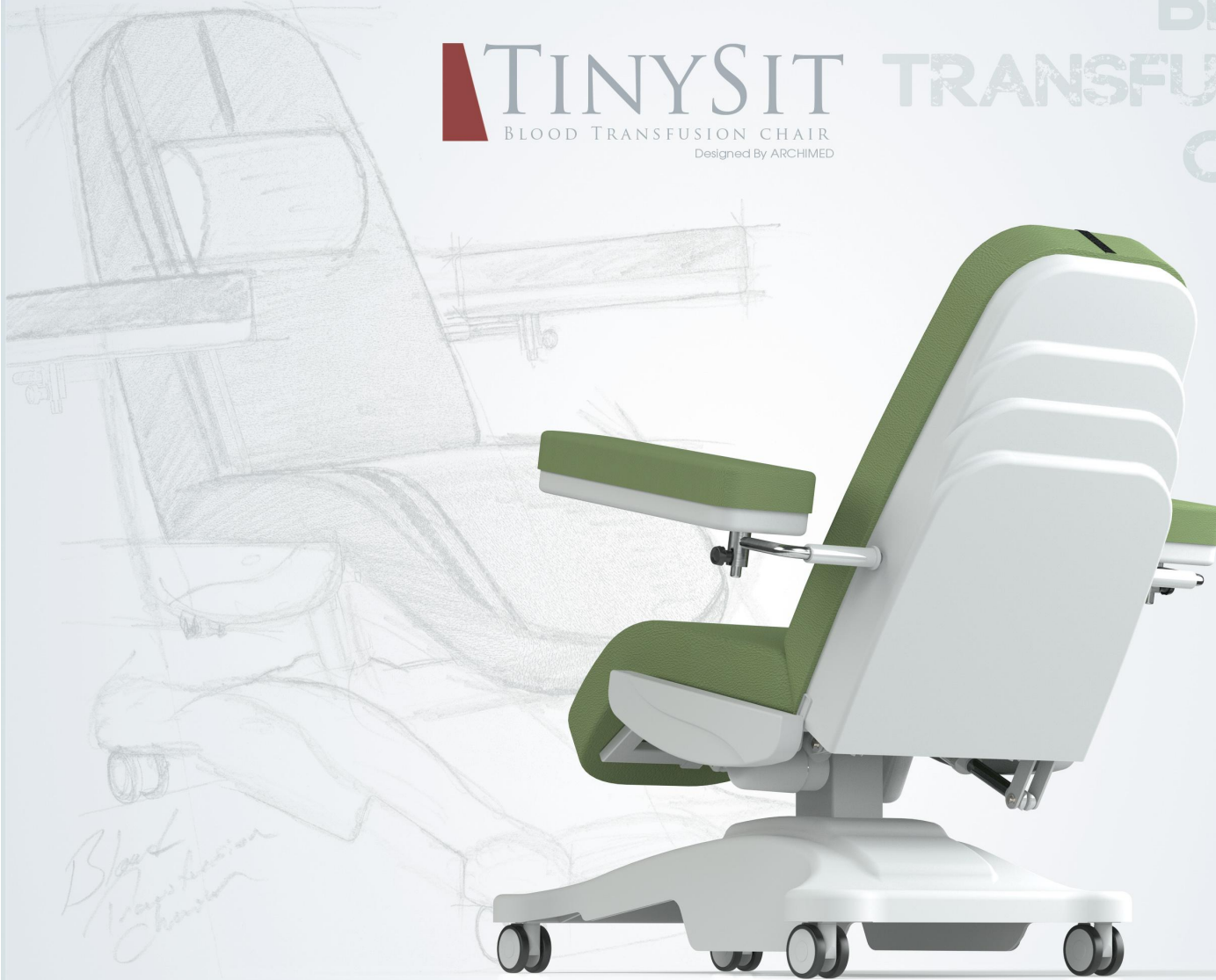

**Arşimed Medikal Kozm. San. Tic Ltd. Şti.**

Mimar Sinan Mah. Bosna Cd. No:5 / 3 Çekmeköy - İstanbul

☎ : +90 216 567 8 567 (pbx) 📠 : +90 216 567 8 367 (pbx)

🌐 : www.arsimed.com.tr 📧 : info@arsimed.com.tr



EN 60601-1

EN 60601-2



ISO13485  
certified

**ARCHI MED**<sup>®</sup>  
www.arsimed.com.tr