

HEALTH  
TREATMENT  
PROCESS  
WELLNESS  
EAR  
CHAIR  
OPERATIONS  
NOSE  
PATIENT  
HUMAN  
RECOVERY  
UP/DOWN  
CHAIR  
LEGREST  
PATIENT  
NOSE  
EAR  
CHAIR  
CANCER  
DOCTOR  
HUMAN  
TREATMENT  
BODY  
ANATOMY  
HUMAN  
DOCTOR  
EXAMINATION  
THROAT  
BODY  
LIFE  
NURSE  
WELLNESS  
CANCER  
HEALTH  
EXAMINATION  
PATIENT  
LEGREST  
FAMILY



# ENT CHAIR TITAN

Designed By ARCHIMED



EAR  
INTERVENTION  
EAR  
THROAT  
BODY

HEALTH  
RECOVERY  
CHAIR  
TREDELLENBURG  
EAR  
WELLNESS  
PATIENT  
LIFE  
NURSE  
CANCER  
TREATMENT  
LEGREST

BODY  
LIFE  
PROCESS

CANCER  
DOCTOR  
HUMAN  
TREATMENT  
BODY  
ANATOMY  
HUMAN  
DOCTOR  
EXAMINATION  
THROAT  
BODY  
LIFE  
NURSE  
WELLNESS  
CANCER  
HEALTH  
EXAMINATION  
PATIENT  
LEGREST  
FAMILY



## EN 03 - S Archimed Titan KBB Koltuğu (3 Motorlu)

K.B.B. koltuğu sırt, oturak ve ayak kısımları olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır. El kumandası ile komut verilen 3 Adet DC motor ile sırt aşağı/yukarı, yükseklik ayarı, ayak parçası aşağı/yukarı hareketlerini yapabileceğine sahiptir. Sökülüp takılabilir ve ayarlanabilir başlığı ve katlanabilir kramp basamağı bulunmaktadır. Başlık aparatı üç ekseninde ayarlanabilmektedir. Böylece hasta konforu ön planda tutulmuştur. Kol kısımları koltuğun sırt kısmının hareketleri ile doğru oranda hareket ederek yere olan paralellikini bozmamaktadır. Koltuk dışındaki abs kaplamalar döşemenin içinde kalacak şekilde dizayn edilmiş olup ve döşeme ve plastik arasında kir vs girmesine engel olmaktadır. Yükseklik ayarını teleskobik motor sistemi ile yapmaktadır ve bu sayede, koltuğun minimum ve maksimum yükseklikleri, hastanın rahatı ve hekimin kullanımı açısından büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Kendi ekseninde 355° dönebilir. Oturağın yanındaki mekanizma kolu ile istenilen yerde sabitlenebilir. Çelik konstrüksiyon galvaniz kaplama ve elektrostatik toz boya ile korozyona karşı korumaya alınmış ve tamamı anti-bakteriyel ve kolay temizlenebilir özellikteki ABS plastiklerle kaplanmıştır. Ayrıca çok şık görünümüne ve sağlamlığına sahiptir. Geniş renk seçeneğine sahip olan döşeme aksamı birinci kalite süngerden yapılmıştır. Özel vinleks malzemeyle kaplanmış olan döşeme uzun ömürlü, kolay temizlenebilir, su geçirmez ve anti-bakteriyel özelliktedir.

ENT CHAIR  
**TITAN**  
Designed By ARCHIMED



Kendi ekseninde etrafında  
355 derece dönebilir.

Rotates 355 degrees  
around its own axis



Sökülüp takılabilir ve  
istenilen seviyede  
ayarlanabilir baş kısmı

Removable and  
adjustable head rest



## EN 03 -S Archimed Titan ENT Chair (3 Motors)

Archimed E.N.T. Chair consists of 3 main parts. Back rest, seat part and leg rest. The chair makes back up&down, chair up&down and leg rest up&down movements by 3 DC motors with using handset. Chair uses advanced telescopic motors allowing for the most versatile positioning. The chair is able to rotate 355 degrees in either direction around its own axis. The armrests move together with the backrest and stay parallel to the ground. There is a removable cramp support and a removable head part on the table. Head part can be adjustable on 3 levels. Chair is covered with cleanable, waterproof material and the chair is comfortable and orthopedically designed. Cushion has a suitable hardness and upholstery made of leatherette which is easy cleanable and harmless to skin. Steel construction is painted with electrostatic powder coating and protected with galvanize against corrosion. And the construction is covered with anti-bacterial and easy cleanable ABS plastic. So that, the chairs seems more aesthetically. ABS covering designed to keep itself in the upholstery and it blocks the dust which may go into the upholstery.



Sırt hareketi / Back rest movement



Ayak hareketi / Leg rest movement



Koltuğun yükseklik hareketi / Chair up&down movement

## Renkler



No:1 Beyaz / White



No:2 Krem / Beige



No:3 Sötlü Kahve / Milky Brown



No:4 Koyu Kahve / Dark Brown



No:5 Fıstık Yeşili / Pistachio Green



No:6 Açık Yeşil / Light Green



No:7 Sarı / Yellow



No:8 Turuncu / Orange



No:9 Bordo / Claret Red



No:10 Pembe / Pink



No:11 Lila / Lilac



No:12 Açık Mavi / Light Blue



No:13 Lacivert / Navy Blue






No:14 Gri / Gray




No:15 Koyu Yeşil / Dark Green



No:16 Siyah / Black

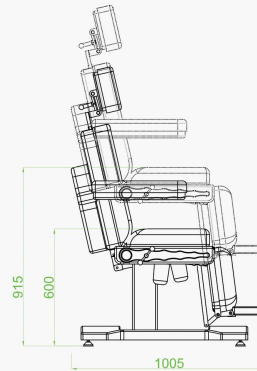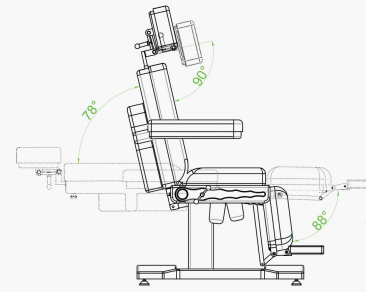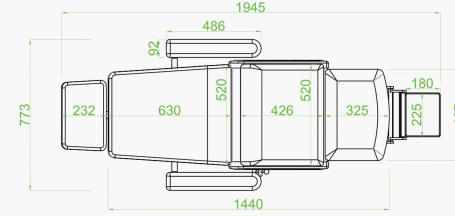

## Teknik Özellikler Technical Specifications

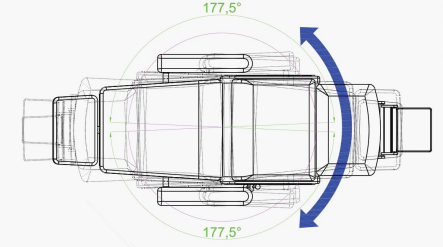

ÖZELLİKLER / FEATURES	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS	
KOMPLE UZUNLUK / FULL LENGTH	1945 mm	76.57 Inch
EN / WIDTH	520 mm	20.47 Inch
KOLÇAKLI EN / WIDTH WITH ARMRESTS	773 mm	30.43 Inch
MIN. YÜKSEKLİK / MIN. HEIGHT	600 mm	23.62 Inch
MAX. YÜKSEKLİK / MAX. HEIGHT	915 mm	36.02 Inch
SIRT EN / BACKREST WIDTH	520 mm	20.47 Inch
SIRT UZUNLUK / BACKREST LENGTH	630 mm	24.80 Inch
OTURAK EN / SEAT WIDTH	520 mm	20.47 Inch
OTURAK UZUNLUK / SEAT LENGTH	426 mm	16.77 Inch
AYAK EN / FOOTREST WIDTH	467 mm	18.38 Inch
AYAK UZUNLUK / FOOTREST LENGTH	325 mm	12.79 Inch
KOLÇAK UZUNLUK / ARMREST LENGTH	486 mm	19.13 Inch
KOLÇAK EN / ARMREST WIDTH	92 mm	3.62 Inch
SIRT AÇISI / BACK ANGLE		78 °
AYAK AÇISI / FOOT ANGLE		88 °
KAFALIK EN / HEADREST WIDTH	361 mm	14.21 Inch
KAFALIK UZUNLUK / HEADREST LENGTH	232 mm	9.13 Inch
BASAMAK EN / STAIR WIDTH	225 mm	8.85 Inch
BASAMAK UZUNLUK / STAIR LENGTH	180 mm	7.08 Inch
SÜNGER DANIŞİTE / FOAM DENSITY		30
DÖŞEME ÖZELLİK / UPHOLSTERY FEATURE		SUNİ DERİ / LEATHERETTE
TAŞIMA KAPATİTESİ / MAX. SAFE LOAD CAPACITY	160 kg	352.73 Pound
ÜRÜN AĞIRLIK / PRODUCT WEIGHT	110 kg	242.50 Pound
DÖNME HAREKETİ / ROTATION ANGLE		355 °

ENT CHAIR (3 MOTORS)

ENT

ENT CHAIR  
**TITAN**  
Designed By ARCHIMED



ENT CHAIR (3 MOTORS)



**Arşimed Medikal Kozm. San. Tic Ltd. Şti.**

Mimar Sinan Mah. Bosna Cd. No:5 / 3 Çekmeköy - İstanbul

☎ : +90 216 567 8 567 (pbx) 📠 : +90 216 567 8 367 (pbx)

🌐 : www.arsimed.com.tr 📧 : info@arsimed.com.tr

CE

FDA

EN 60601-1

EN 60601-2

ISO  
9001

ISO13485  
certified

ARCHIMED®  
www.arsimed.com.tr